

ZEFIR

VILA

CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I



NEW

Opšte informacije

Specijalna kolica za decu sa posebnim potrebama

Kolica ZEFIR VILA namenjena su deci sa invaliditetom, visine između 80 i 130 cm i težine do 40 kg. Njihov jedinstven, kompaktan dizajn i relativno male dimenzije kada su sklopljena čine ih savršenim za putovanja, pružajući udobnost i detetu i njegovateljima.

ZEFIRA VILA nudi niz funkcionalnih rešenja koja se mogu prilagoditi rastućim potrebama deteta. Podešavanje ugla naslona i visine oslonca za noge omogućava potpunu prilagodbu kolica individualnim zahtevima. Mogućnost promene dubine sedišta i širine naslona – zahvaljujući upotrebi podupirača – omogućava da kolica „rastu“ zajedno sa korisnikom, pružajući udobnost i podršku u svakoj fazi razvoja.



Pored toga, kao i svi proizvodi iz naše ponude, kolica ZEFIR VILA dostupna su sa širokim spektrom dodatne opreme koja olakšava svakodnevne šetnje i pruža zaštitu u nepovoljnim vremenskim uslovima. To je sveobuhvatno rešenje koje kombinuje funkcionalnost i udobnost korišćenja.

Ovo je medicinsko sredstvo.

Koristite ga u skladu sa uputstvom za upotrebu ili oznakom.

KARAKTERISTIKE KOLICA ZEFIR **VILA**


PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA

Sedeći položaj



PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA

Poluležeći položaj

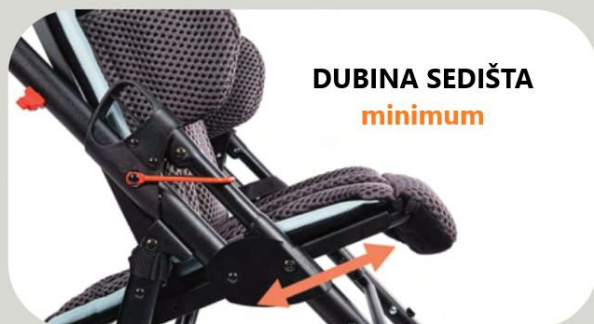

DUBINA SEDIŠTA
minimum



DUBINA SEDIŠTA
maksimum

TESTIRANA U **SLUČAJU** **SUDARA**

Kolica su prošla rigorozne testove sudara koji potvrđuju njihovu bezbednost tokom transporta u vozilu. Zahvaljujući tome, korisnik može da putuje u kolicima pričvršćen sigurnosnim pojasevima u automobilu, u skladu sa važećim standardima. Ovaj sertifikat pruža sigurnost da kolica ispunjavaju najviše standarde bezbednosti, obezbeđujući stabilnost i zaštitu tokom vožnje.



INDIKACIJE

- *Paraliza i pareza donjih ekstremiteta različitog porekla*
- *Paraliza i pareza trupa*
- *Slabost posturalnih mišića odgovornih za održavanje pravilnog položaja tela*
- *Cerebralna paraliza*
- *Mijelomeningokela*
- *Mišićne distrofije*

KONTRAINDIKACIJE

U slučaju kontraindikacija za sedeći položaj i/ili pasivnu vertikalizaciju, podešavanje kolica treba konsultovati sa fizioterapeutom ili nadležnim lekarom.



LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION

Lagana konstrukcija kolica idealno je rešenje za roditelje koji cene mobilnost i udobnost. Kolica su laka za nošenje i upravljanje, što šetnje i putovanja čini manje napornim. Takođe, olakšava sklapanje i skladištenje kolica.



NEW UPHOLSTERY MATERIAL

Materijal koji se koristi u izradi kolica je prijateljski prema ljudima i životinjama. Napravljen je od bezbednih, netoksičnih sirovina koje ispunjavaju najviše standarde kvaliteta i ekologije. Nežan je za kožu deteta, a ujedno izdržljiv i otporan na oštećenja.



SHOCK ABSORPTION

Amortizacija u kolicima je ključna za udobnost i bezbednost. Efikasno ublažava udarce na neravnom terenu, što omogućava detetu mirno putovanje bez neprijatnosti. Istovremeno, olakšava upravljanje kolicima, omogućava glatko manevrisanje i smanjuje opterećenje roditelja.



BREATHABLE MATERIAL

Unutrašnjost kolica i deo dodatne opreme izrađeni su od prozračnog materijala koji omogućava odličnu cirkulaciju vazduha. Zahvaljujući tome, dete se oseća prijatno čak i tokom dugih šetnji, a koža ostaje suva i bez iritacija. Materijal je ne samo prozračan, već i mekan i nežan, što dodatno povećava udobnost pri korišćenju.



UV 50 TECHNOLOGY

UV tehnologija u tkaninama štiti od izbledivanja, pa boje ostaju intenzivne čak i pri izlaganju suncu.



DURABLE POLYURETHANE TIRES

Izuzetno izdržljive i fleksibilne gume, u potpunosti izrađene od poliuretana, ne zahtevaju pumpanje. Ovakav dizajn značajno smanjuje rizik od slučajnog oštećenja, obezbeđujući pouzdanost i dug vek trajanja.


EQUIPMENT



PODESIVE PELOTE

PODESIVE PAPUČICE
ZA NOGE

SIGURNOSNA BARIJERA

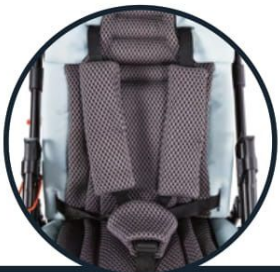ABDUKCIONI
POJASEVI

SIGURNOSNI POJAS



ABDUKCIONI KLIN



TERAPEUTSKI STOČIĆ



TENDA



ZIMSKE RUKAVICE



TORBA ZA PUTOVANJA



KORPA ZA KUPOVINU



SUNCOBRAN

MREŽA PROTIV
KOMARACA

KABANICA

ZIMSKA NAVLAKA ZA
NOGE

TECHNICAL PARAMETERS OF THE STROLLER

Širina sedišta: 18*/39 cm

Efektivna dubina sedišta : 23*/33 cm

Visina naslona : 66 cm

Širina naslona : 18*/39 cm

Visina između sedišta i papučica za noge : 21 – 40,5 cm, 3 positions

Ukupna težina kolica : 21 – 24 kg

Ukupna dužina kolica : 97 – 108 cm

Ukupna visina kolica : 122 – 135 cm

Ukupna širina kolica : 61 cm

VAŽNA NAPOMENA!

Izbor medicinskog sredstva odgovarajućeg za određenu bolest i stanje pacijenta mora se doneti uz pomoć specijaliste lekara ili fizioterapeuta. Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu i etiketu ili se konsultujte sa svojim lekarom, jer ovo medicinsko sredstvo možda nije pogodno za vas.